

no!
no!
MICRO

Guía de Funcionamiento

Visite www.HowToNoNo.com
para ver videos, consejos y trucos

Contenido

Información sobre el no!no!

- 4** Información sobre el no!no!
- 6** Advertencias de Seguridad
- 8** Precauciones
- 10** Qué esperar
- 11** Dónde usarlo


Cómo funciona el no!no!

- 12** Introducción Rápida al no!no!
- 14** Antes de su Primer Tratamiento
- 14** Carga del no!no!
- 15** Acerca de las Puntas Thermicon
- 17** Encendido/Apagado

- 18** Cómo deslizar el no!no!
- 21** Acerca de la Luz Roja y Azul
- 22** Tratamiento del Vello Facial
- 24** Después de cada Tratamiento: Exfoliar
- 25** Cómo cuidar su no!no!

Resolución de Problemas y Especificaciones Técnicas

- 26** Resolución de Problemas
- 27** Especificaciones Técnicas
- 29** Garantía
- 31** Soporte al Cliente

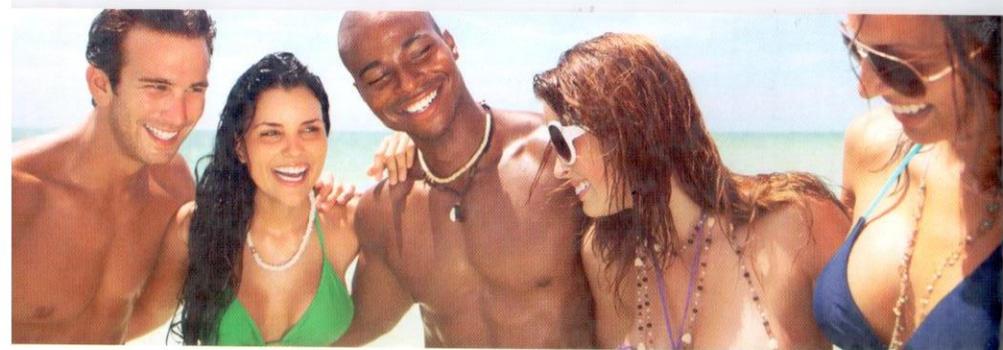

Información sobre el no!no!

no!no!® es un producto para **uso doméstico** que sirve para **todos los tipos de piel** y **todos los colores de vello**.

Está destinado a **hombres y mujeres**, y diseñado para la **eliminación del vello facial y corporal** mediante un tratamiento periódico y sostenido en el tiempo.

Los resultados llevan tiempo, paciencia y un decidido compromiso con los procedimientos especiales del tratamiento. Cada persona tiene su propio patrón de crecimiento de vello y cada una verá los resultados a su propio ritmo.

LEA esta GUÍA DE FUNCIONAMIENTO en su totalidad antes de usar el dispositivo para garantizar seguridad y resultados.

El Dispositivo no!no!



Punta ancha Thermicon™



Alambre termodinámico

Punta estrecha Thermicon



Alambre termodinámico



Advertencias de Seguridad

Acerca de este producto....

-  **No use** el dispositivo sobre los genitales o los pezones.
-  **No use** este dispositivo con la punta Thermicon sobre la piel sensible del contorno del ojo, especialmente bajo el párpado inferior.
-  **No use** este dispositivo sobre las cejas.
-  **No use** este dispositivo sobre piel bronceada, heridas abiertas, moretones, ampollas, lunares ni sobre áreas levantadas como cicatrices.
-  **Si tiene alguna afección en la piel** diferente a las indicadas arriba, como inflamaciones frías, herpes, acné agudo, consulte con su médico antes de usar este dispositivo.
-  **No use** desodorantes, lubricantes, líquidos, cremas, geles, alcohol, agua, etc. antes de aplicar este dispositivo.

-  **No permita** que el alambre termodinámico que se encuentra dentro de la punta Thermicon toque su piel.
-  **Use este dispositivo únicamente** para el fin para el que fue diseñado, según esta Guía de Funcionamiento.
-  Este dispositivo puede ser usado por **niños a partir de los 8 años de edad** y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento toda vez que estén bajo supervisión o hubieran recibido instrucciones al respecto y sean conscientes de los peligros inherentes. No permita que los niños jueguen con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del mismo no deben ser efectuados por niños salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el dispositivo y el cargador fuera del alcance de niños menores de 8 años.
-  **No está diseñado** para animales.
-  Mantenga el dispositivo **seco**. ☔

Precauciones

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, etc.

- > **No intente rescatar** un dispositivo que se ha caído al agua mientras está enchufado. **Desenchufe el cargador** antes de sacar el dispositivo del agua.
- > **No coloque** ni guarde el dispositivo cerca del lavamanós o la bañera.
- > Este dispositivo **nunca debe dejarse sin supervisión** mientras está enchufado.
- > **No use** la punta Thermicom si el alambre está torcido o tiene algún tipo de daño.
- > **Apague el dispositivo** mientras carga la punta Thermicon.
- > **No use el cargador** si el cable o el enchufe tienen algún tipo de daño.

- > **No use** este dispositivo cerca de, ni lo apoye sobre objetos inflamables como papel, tela, etc.
 - > **Siempre desenchufe el cargador** del tomacorriente inmediatamente después de cargarlo o de usarlo y antes de limpiarlo.
 - > **No coloque** este dispositivo cerca del agua o líquidos.
 - > Este dispositivo **únicamente debe usarse** con el cargador provisto.
 - > **Siempre apague** el dispositivo cuando haya terminado de usarlo.
 - > **No abra** la carcasa exterior del dispositivo. Se podría dañar el dispositivo y se anularía la garantía.
-  **Precaución:** Consulte los documentos adjuntos.

Qué esperar: Prepárese para comprometer sus sentidos!

Cuando usas tu no!no!, la experiencia te rodeará.

TOCAR / SENTIR - Mientras que todo el mundo es diferente, algunas personas experimentan un hormigueo ligero cuando usan no!no! por primera vez, especialmente sobre áreas sensibles. Esta sensación se desvanece y desaparece después de algunas sesiones de tratamiento. También puede sentir un calentamiento sobre la piel. Si se siente incómodamente caliente durante el tratamiento, tome descansos cortos entre cada uso en cualquier área.

OLOR - Espere oler el pelo que se cristaliza mientras que la tecnología patentada de Thermicon trata el pelo. El olor significa que está trabajando!

VISTA - Mientras usa su no!no!, verá la luz Thermicon cuando la punta y el dispositivo están comprometidos. También verá el cabello cristalizado y la mayoría se quitará cuando llegue a la fase de pulido sin embargo, si todavía hay algún resto, continúe el seguimiento con otro tratamiento no!no!. Tenga presente que usted está tratando el pelo incluso si no se quita inmediatamente.

SONIDO - Durante sus tratamientos, mientras se desliza por el área que está tratando, escuchará un leve zumbido, como ruido blanco.

Dónde Usar el no!no!



LAS MUJERES NO DEBEN usarlo sobre:

- ✗ Pezones
- ✗ Genitales
- ✗ Alrededor de los ojos o las cejas

LOS HOMBRES NO DEBEN usarlo sobre:

- ✗ Pezones
- ✗ Genitales
- ✗ Alrededor de los ojos o las cejas

Información sobre el no!no!

Introducción Rápida al no!no!

Antes de usar el dispositivo no!no!, LEA esta GUÍA DE FUNCIONAMIENTO en su totalidad para garantizar seguridad y resultados.

1



Cargar y destapar

2



Elegir punta

3



Insertar punta

4



Encender

5



Deslizar

6



Exfoliar

Listo para usar



Antes de su Primer Tratamiento



CARGUE el dispositivo durante al menos 5 horas.

- > La carga estará completa cuando el **icono verde de Batería** de la Pantalla de Estado deje de parpadear.
- > Una vez completada la carga **desenchufe el cargador** de la pared y del dispositivo.



Preparación

- > Limpie completamente el área de tratamiento, eliminando lociones, aceites, geles o cremas antes de usar el dispositivo.

Prueba

- > Pruebe una zona pequeña del área que desea tratar. Si hay alguna molestia, **Pare** y vuelva a la zona más tarde.

Seleccione su Punta Thermicon



Punta ancha

- > Use la Punta ancha para tratar áreas amplias como brazos, piernas, pecho y espalda.



Punta Estrecha

- > Use la Punta estrecha para tratar áreas reducidas y sensibles como rostro, cuello, axilas y línea de bikini.

Inserte la punta Thermicon.



INSERCIÓN de la punta Thermicon

- > Verifique que el dispositivo esté **apagado**.
- > Sostenga el no!no! con una mano y la punta con la otra.
- > Verifique que ambos logos estén mirando en la misma dirección y alinee las patas del encastre con los orificios de la punta Thermicon.
- > Empuje suavemente a su lugar.

EXTRACCIÓN de la punta Thermicon

- > Tome la punta de ambos lados.
- > Retire suavemente la punta del encastre.

Cuándo REEMPLAZAR la punta Thermicon

- > Si la luz de guía se pone roja.
- > Si deja de funcionar con eficiencia.
- > Si el alambre tiene algún tipo de daño.
- > Si el icono de la punta Thermicon parpadea en rojo en la pantalla de estado.

Notas:

- > Verifique que la punta Thermicon esté correctamente colocada en el encastre antes de iniciar el tratamiento.
- > Nunca use una punta Thermicon si el alambre está torcido o rasgado.



Encienda su no!no! [FIGURA A]

- > **Presione** el botón de Encendido hasta que los iconos de Batería y Punta **se enciendan**.

NOTA: Si aparece la luz roja, **vaya a la página 21** donde encontrará más instrucciones.



Cómo se desliza el no!no!

Deslice el dispositivo no!no! en un ángulo de aproximadamente 90° colocando el rodillo bien plano contra su piel y el logotipo mirando en la dirección que esté tratando. [FIGURA B]

Notas Importantes sobre cómo se desliza:

> **Deslice sólo en un sentido**, en la dirección del logotipo. No deslice hacia atrás y adelante.

- > Es mejor **deslizarlo hacia el cuerpo a contrapelo** del crecimiento del vello. Sin embargo, si le resulta más cómodo, puede deslizarlo en otras direcciones, pero siempre en el sentido de la pantalla de estado.
- > **Realice un movimiento CONSTANTE, UNIFORME y PAREJO.** Si lo desliza *demasiado lento*, el dispositivo no se activará; si lo desliza *demasiado rápido*, no obtendrá resultados óptimos.
- > **Cuando lo deslice a la velocidad correcta, la luz azul quedará fija.** Una luz parpadeante o destellante indica que podría estar moviendo el dispositivo demasiado lento. Una vez que ha ajustado su movimiento, la luz azul quedará fija.
- > No presione demasiado fuerte contra la piel.
- > Es posible que deba **pasar por una zona más de una vez**; 4-6 pases podrían ser suficientes. Si el nivel de calor de la piel no le resulta molesto, puede continuar. Si después de exfoliar todavía queda vello y su piel está demasiado caliente, espere unos minutos para repasar el área. Intente eliminar todo el vello.
- > **Exfolie después de cada tratamiento** para eliminar el vello que siga quedando.

Deslice el no!no! sobre áreas redondeadas


Asegúrese de **practicar sobre** piel lisa y pareja como la de **piernas y brazos** antes de pasar al rostro, rodillas, axilas o línea de bikini.

Deslice lentamente y deje que el no!no! siga la curva natural del cuerpo.

JTA: El rostro y la línea de bikini podrían ser extremadamente sensibles a temperatura. Si el calor fuera demasiado molesto durante el tratamiento, **ARE**, trabaje sobre otra zona y vuelva más tarde.


! **NO USE no!no! sobre los pezones o los genitales, ni alrededor de los ojos o las cejas.**

Acerca de la Luz Roja y Azul

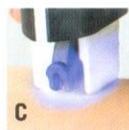

C

La **luz azul** que está debajo de la punta Thermicon lo guiará durante todo su tratamiento. Sólo estará visible cuando esté deslizando el no!no! a la velocidad correcta. **[FIGURA C]**

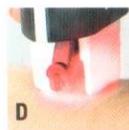

D

La **luz roja** sólo aparece cuando la punta Thermicon está mal instalada, dañada o agotada, o si se debe cargar el dispositivo. **[FIGURA D]**

LUZ AZUL	LUZ ROJA	SIGNIFICADO
ENCENDIDO ESTABLE	APAGADO	Corregir velocidad de deslizamiento
APAGADO	PARPADEANDO	Falta punta Thermicon en encastre
APAGADO	PARPADEANDO	Punta Thermicon agotada
APAGADO	PARPADEANDO	Punta Thermicon dañada
PARPADEANDO	APAGADO	Velocidad de deslizamiento incorrecta
APAGADO	APAGADO	Lento o sin movimiento

Tratamiento del Vello Facial [FIGURA E]

PRUEBE el no!no! sobre una zona discreta del rostro para ver cómo reacciona su piel.


Para tratar la zona del labio superior, comience debajo de la nariz y trabaje hacia afuera o hacia adentro.

Cuando trate el mentón, maxilar inferior o las patillas, comience justo debajo de la base del mentón o maxilar y deslice el no!no! hacia arriba siguiendo la curva de su rostro.

NOTA: La zona que está debajo del ojo y alrededor del párpado es articularmente sensible. NO trate esa zona.

visite www.HowToNoNo.com para ver videos útiles sobre cómo maniobrar el o!no! sobre el rostro.

- > Si fuera necesario, estire la piel y/o frunza los labios hacia adentro para crear una **superficie lisa**.
- > Si tiene alguna molestia, **PARE**.
- > **NO** deje que sus labios entren en contacto con el alambre termodinámico.
- > **NO** repase demasiado la misma zona.

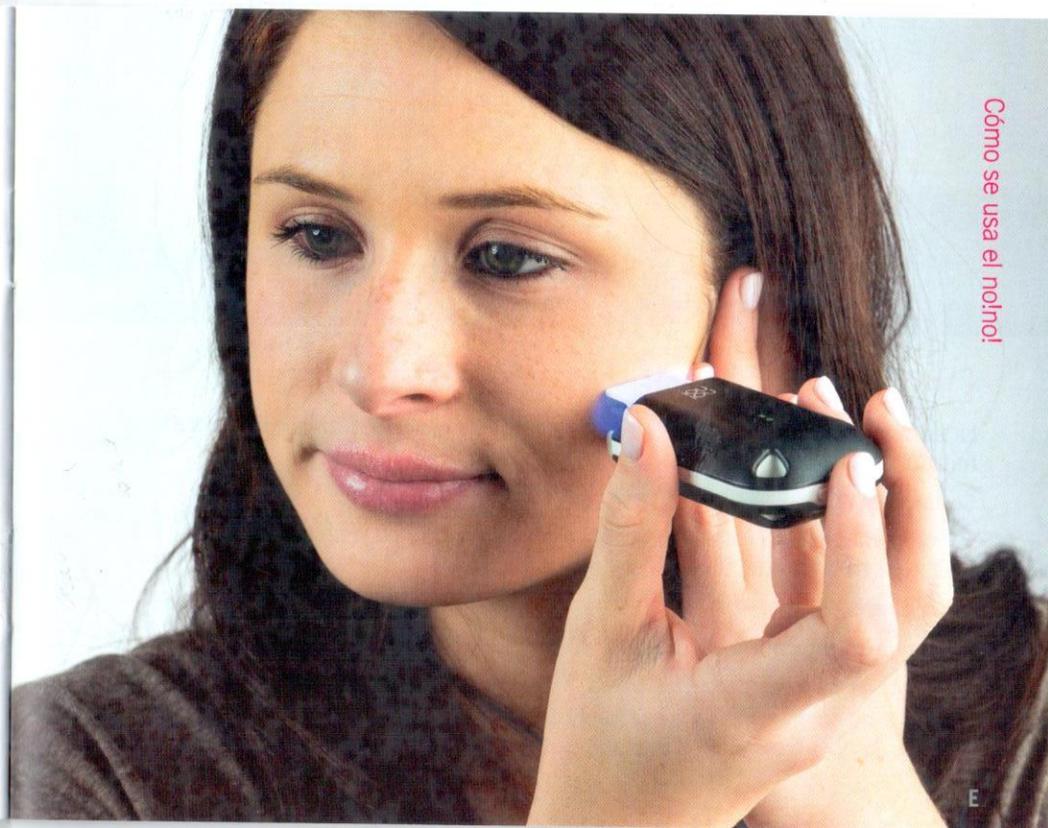

Cómo se usa el no!no!



Después de cada tratamiento: Exfoliar

La exfoliación pule, elimina el vello tratado y deja su piel tersa. Sin la exfoliación, el vello tratado queda sobre la piel dejando una sensación de escozor.


Sostenga el exfoliador

> Frote firmemente el exfoliador con movimientos circulares y/o hacia adelante y atrás sobre la zona tratada. [FIGURA F]

Cuándo reemplazar el exfoliador

- > Cuando la almohadilla está lisa.
- > Cuando ya no exfolia con efectividad.

24

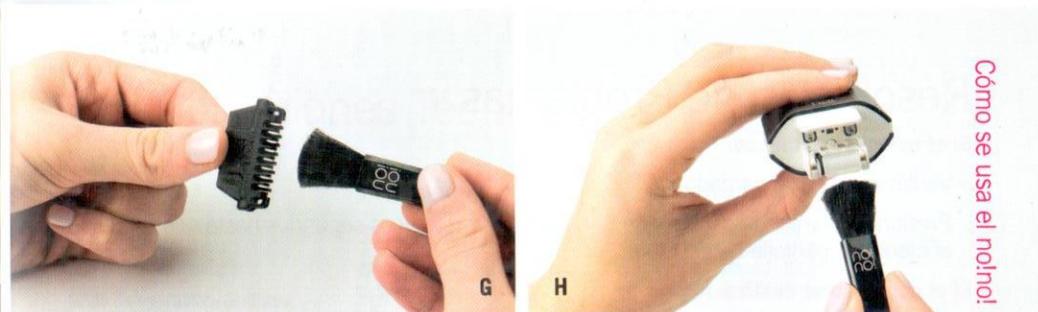

Cómo cuidar su no!no!

NOTA: No use ningún líquido para limpiar el dispositivo, las puntas Thermicon o los rodillos.

Mantenga las puntas Thermicon y el rodillo limpios para disminuir el riesgo de desperfectos y prolongar la vida de las puntas.

1. Apague su no!no!.
2. Extraiga la punta Thermicon.
3. Cepille suavemente el interior de las puntas. [FIGURA G]
4. Cepille los residuos retirándolos del encastre y rodillo. [FIGURA H]

Si algún vello o residuo cayera en el encastre, podría causar un desperfecto en el no!no! Cepille eliminando cualquier partícula que quede en el encastre antes de iniciar un tratamiento.

25

Resolución de Problemas

Si el no!no! no enciende:

- > Verifique que está cargado.
- > Presione y mantenga el botón de Encendido durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de estado.

Si el no!no! no se desliza:

- > Verifique que la punta Thermicon no esté doblada o quebrada y que esté correctamente insertada. Reemplácela si fuera necesario.
- > Aumente la velocidad de deslizamiento.

Si se enciende la luz roja:

- > Verifique si la punta Thermicon necesita ser reemplazada.
- > Vuelva a encender su no!no!
- > Asegúrese de que el dispositivo está cargado.

Si el dispositivo no funciona correctamente, **comuníquese con Soporte al Cliente de no!no!** para más sugerencias de solución de problemas, o visite **www.HowToNoNo.com**.

La garantía de no!no! sólo es válida si el dispositivo ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía. Conserve todos los recibos y el empaque original.

Especificaciones Técnicas

Peso: 61,3gr

Dimensiones físicas:
96,6 x 46,5 x 24,6mm
[3,8 x 1,8 x 0,97 pulg.]

Modo de operación: Continuo

Condiciones operativas



Temperatura:
5°C-30°C

Humedad: 30%-80% HR

Capacidad del cargador: Entrada
100-240VCA/50-60Hz. 0,2A Salida
8,4VCC 0,5A

Transporte y Almacenamiento



Temperatura:
-10°C a 60°C

Humedad: 30-80% HR

Presión atmosférica:

0,1-1,5 atm.

Seguridad eléctrica

Alimentación: Equipo Clase II –
doble aislamiento.

Este aparato no es adecuado para usar con mezcla anestésica inflamable a base de aire, oxígeno, u óxido nitroso.

El sistema de gestión de calidad de ICTV Brands Israel, Ltd. cumple con la Norma de Gestión de Calidad EN ISO 13485:2012.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambio sin previo aviso.

El no!no! MICRO cumple con las siguientes normas y directivas internacionales:

Seguridad de electrodomésticos y artefactos eléctricos similares:
IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-

8, IEC/EN 60335-2-23

Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial, 3ra. ed.: IEC60601-1/ EN60601-1, IEC60601-1-11

Compatibilidad electromagnética:
IEC60601-1-2, EN55014-1,

EN55014-2, EN62233 y FCC Parte 15, Subparte B, Clase B

UE Directiva de Baja Tensión (Seguridad eléctrica)

Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CE y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

La garantía de su no!no! es de un año para piezas y servicio. Conserve su recibo.

Símbolos en dispositivos:

 Interruptor de Encendido (On)/Apagado (Off)

 La marca CE representa el cumplimiento con la Directiva de Bajo Voltaje Europea 2006/95/EC y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC.

 Proteja el medio ambiente evitando eliminar este producto junto con los residuos del hogar (2002/96/EC).

Consulte con su autoridad o distribuidor local para obtener consejos y lugares para reciclar (Europa solamente).

 Consulte el manual de instrucciones. Indica la necesidad de consultar otros documentos adicionales.

Fabricante:



ICTV Brands Israel, Ltd.
5 Hanagar
Hod Hasharon, 4501307
Israel

Representante en la CE:



ICTV Brands UK, Ltd.
25 Horsell Road
London, N5 1XL, U.K.
Teléfono: +44 20 7319 9190
Fax: +44 20 7319 9191
info@ictvbrands.com

Soporte al Cliente:

Soporte al Cliente en EEUU y Canadá:
888.525.7580
Soporte al Cliente en Europa:
+44 344 482 5089

Para ver más productos no!no! no deje de visitar:
EEUU y Canadá: www.officialnono.com
Reino Unido: www.officialnono.co.uk

Garantía

Garantía limitada:

Esta garantía limitada cubre el producto no!no! La garantía contempla la reparación o el reemplazo del dispositivo o de sus componentes, sin cargo, dentro del período de garantía.

Nota: Algunos componentes, como las puntas Thermicon y los exfoliantes, están excluidos de la cobertura de esta garantía, pues son repuestos/consumibles y están sujetos a desgaste.

El período de la garantía es válido por un (1) año. En determinadas circunstancias, podría estar disponible una garantía extendida desde la fecha de compra original del dispositivo.

Al realizar un reclamo de garantía, usted debe brindar la siguiente información: número de serie del producto, fecha de compra, nombre del garante, dirección y número de teléfono, junto con el recibo o factura original de

venta para verificar la fecha de compra. Cualquier alteración o cambio de los documentos de compra, incluyendo el recibo de venta o factura o no presentar los documentos de compra en el momento de realizar el reclamo de garantía, invalidarán la misma.

Esta garantía no cubre daños ni deterioros:

1. Sufridos o informados en un (1) año o más cuando se compra una garantía extendida con posterioridad a la fecha de compra;
2. Provocados por el uso incorrecto del dispositivo;
3. Debidos a la modificación o reparación del dispositivo por un tercero no autorizado;
4. Debidos a daños o defectos sufridos durante el transporte o manipulación incorrecta que no fueran informados en el momento de recibir el producto;

5. Debidos a la humedad o algún líquido o cuerpo extraño colocado dentro del dispositivo;

6. Debidos al uso del dispositivo con accesorios o aditamentos no aprobados;

7. Debidos al uso del dispositivo en violación de los procedimientos que figuran en el manual del usuario;

8. Debidos a casos fortuitos, eventos naturales (inundaciones, incendios, rayos, etc.), fuerza mayor o daños accidentales o deliberados; o

9. Debidos a haber sometido el dispositivo a entornos con un alto nivel de polvo o con exceso de humedad o temperatura.

Esta garantía limitada excluye específicamente toda otra garantía, expresa o implícita en la legislación, incluidas las garantías de comerciabilidad y aptitud para un determinado uso. El fabricante no será responsable por daños imprevistos o emergentes resultado del uso de este dispositivo. Esta garantía no se extiende a compras realizadas en establecimientos que no sean distribuidores autorizados del dispositivo no!no!.

Esta garantía limitada otorga derechos específicos a los compradores del dispositivo no!no!; los compradores pueden tener otros derechos que varían de un país a otro. En los Estados Unidos, esta garantía limitada se regirá por las leyes del Estado de Pensilvania, independientemente de las disposiciones relativas a conflicto de leyes;

cualquier disputa bajo esta garantía se resolverá en los tribunales del estado situados en el condado donde se encuentre el fabricante.

Para más información, visite www.officialnono.com.

Soporte al Cliente

Soporte al Cliente en EEUU y Canadá: 888.525.7580

Soporte al Cliente en Europa: +44 344 482 5089

www.HowToNoNo.com

Para ver más productos no!no! no deje de visitar:

EEUU y Canadá: www.officialnono.com

Reino Unido: www.officialnono.co.uk

no!
no!
MICRO

INSTNNMES1/LIT-01000SP/Rev.A00/May 2017

WY1720