

SENSICA

Guía Rápida



Sensilift

Es importante leer toda la guía antes de utilizar el dispositivo Sensilift.

WWW.SENSICA.COM

Introducción

a Sensilift

Si está leyendo esto, significa que usted misma quiere tomar las riendas de su belleza. Va a poder decidir cuándo, dónde y cuánto.

No hay nada malo en querer mejorar lo que ve en el espejo. La tecnología de Sensica mejora lo que la naturaleza le ha dado, porque Sensica y la naturaleza van de la mano.

Es un placer conocerla

Ante todo, gracias por su voto de confianza. Al elegir Sensica, ha optado por la opción más adecuada para el tratamiento del rostro. En Sensica, hemos aprovechado una experiencia de muchos años en el campo de la estética médica. De hecho, estos dispositivos domésticos

están diseñados y creados con la misma tecnología usada en las clínicas y diseñados por los mismos profesionales. Nuestros dispositivos también han sido sometidos a pruebas clínicas, están autorizados por la FDA, y sabemos que son muy efectivos y también seguros.

Sensica y la naturaleza Mejor juntos

Apostamos por la naturaleza y lo natural. No son "arrugas", sino líneas de expresión; no es "piel flácida", sino piel madura... ¡Así es! De hecho, aunque le guste lo que la naturaleza le ha dado, no significa que 35, 40 o 50 años más tarde no necesite cierta ayuda; ya va siendo tiempo...

Lo que hacemos es colaborar con los procesos naturales de su cuerpo. Nuestro dispositivo para el estiramiento de la piel estimula la formación del colágeno para estirar, reafirmar y levantar su piel, tal y como lo hace la naturaleza... cuando se tiene 20 años.

Para empezar

1. 48 horas antes de empezar su primer tratamiento integral, realice una prueba previa en cada una de las zonas a tratar.
2. Conecte el dispositivo a una toma de corriente. Verá que el indicador de estado muestra una luz intermitente amarilla.
3. Asegúrese de tener la piel limpia y seca, sin cremas ni maquillaje.
4. Aplique una capa delgada y uniforme del gel de base en la zona a tratar.
5. Fije el nivel de energía presionando el botón RF (ver debajo) repetidas veces, hasta llegar al nivel deseado: 1, 2 o 3.
6. Presione el botón de masaje (ver abajo) para fijar el nivel de masaje deseado: 1 o 2.

Botón RF - 📶 Botón de masaje - 🤲

¡Hola! Soy el asesor de belleza de Sensica y estoy aquí para darle algunos consejos extra...

No se impaciente. Empiece siempre por el nivel 1 y vaya aumentando. Le dará confianza y se sentirá cómoda.

Las características del masaje lo hacen penetrar hasta las capas más profundas de la piel: por ello el dispositivo es muy efectivo.

Su dispositivo ya está listo para usarse

1. Sitúe los electrodos de RF (dedos de masaje) en contacto con la piel.
2. Debería ver una luz verde fija en cuanto se establece el contacto con la piel.
3. Mueva el dispositivo sobre la zona a tratar (tal y como se indica en la sección 04) con movimientos circulares durante 5 minutos (10 minutos para la frente).
4. El tratamiento le producirá una sensación de calor sobre la piel.
5. Elimine todo residuo de gel de base de la zona tratada. Para mejorar los resultados, aplique la crema Age Defying de Sensica (también disponible en www.sensica.com).

¡Ya está! Sentirá la piel realzada, más suave y tirante. ¡Disfrútelo!

Puede usar un espejo durante el tratamiento para vigilar la luz.

No intente tratar todo el rostro a la vez. Hágalo por zonas del tamaño de una tarjeta de visita.

El mecanismo de seguridad del dispositivo regulará el nivel de energía de RF más adecuado para la temperatura de su piel. No se preocupe si siente que la temperatura cambia durante el tratamiento.

Optimizar los resultados

1. Los resultados de los tratamientos con Sensilift pueden diferir en cada persona según los factores ambientales, biológicos, hereditarios o de edad.
2. El dispositivo emite energía de RF cuando la luz verde está fija. Si no sucede después de unos pocos segundos, pruebe a hacer lo siguiente:
 - asegúrese de que ha elegido el nivel de RF.
 - asegúrese de que los electrodos de RF (dedos de masaje) estén en contacto con la piel.
 - asegúrese de haber aplicado suficiente gel de base para mejorar el contacto.
3. Si no nota emisión de calor en la zona de tratamiento durante el mismo:
 - asegúrese de que el indicador de estado tiene la luz verde.
 - aumente el nivel de RF.
 - reduzca la zona a tratar y reduzca el radio del movimiento circular.
4. Para usar adecuadamente su dispositivo Sensilift y entender mejor cómo funciona, lea la sección 06 "Indicadores de estado".

La remodelación y los cambios en la producción de colágeno pueden llevar tiempo. Tenga paciencia: podrá apreciar los resultados tras 8 tratamientos. Para mantener unos resultados óptimos, puede repetir el protocolo de tratamiento con Sensilift según lo necesite.


Y una última cosa: no se preocupe si su piel se vuelve roja o rosa durante o después del tratamiento: significa que el tratamiento funciona...

Para preguntar todo lo que desee saber sobre su piel o sobre el tratamiento diríjase a: sensicabeautyconsultant@Sensica.com

04

Zonas de tratamiento:

- Patas de gallo (1)
- Mejilla y contorno de la boca (2)
- Barbilla y línea de la mandíbula (3)
- Fronte (4)
- Cuello (5)
- Escote y manos

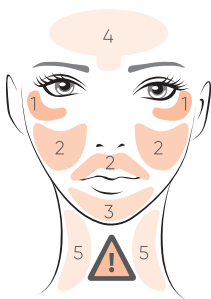


Asegúrese de que dedica 5 minutos a cada zona a tratar, mientras la luz verde permanece fija.

Durante el tratamiento de la línea de la mandíbula, mueva el dispositivo de un lado a otro de la mandíbula.

⚠ Aviso:

Evite el tratamiento en el tercio inferior del cuello, la tiroides, la cavidad de los ojos, las fosas nasales y los labios.

05

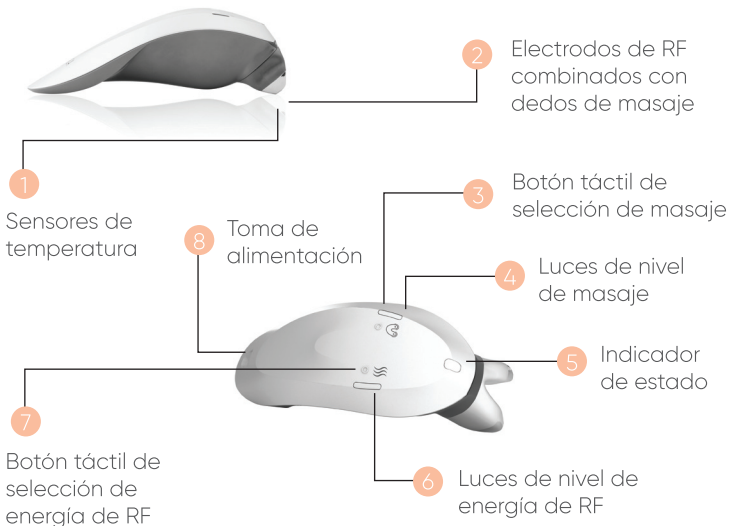

Indicador de estado

Luz amarilla intermitente

Sensilift está en modo de **espera**. En el caso de que no haya luz, asegúrese de que el cable esté conectado de manera adecuada.

Luz verde fija

Sensilift está en modo de **tratamiento**. La RF está activada, se detecta el contacto con la piel y el tratamiento está en curso.

Luz intermitente amarilla y verde

Sensilift está en modo de **error**. El dispositivo ha detectado un error y ha bloqueado la activación de las funciones de RF y de masaje.



Botón táctil de selección de energía de RF

Luces de nivel de energía 1 a 3

Luz verde encendida, indica el nivel de RF. Pulse el botón de selección de nivel de energía de RF repetidamente hasta llegar al nivel deseado: 1, 2, 3, o apagado.



Botón táctil de selección de nivel de masaje

Luces de nivel de velocidad 1 o 2

Luz verde encendida, indica el nivel de funcionamiento del masajeador. Pulse el botón de selección de nivel de masaje repetidamente hasta llegar al nivel deseado: 1, 2, o apagado.